


ENBIO[®]

L'autoclave de classe B le
plus rapide du monde



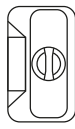

Speedmaster.

Enbio stérilise vos instruments très rapidement et change la façon dont vous travaillez. Maintenant, vous pouvez stériliser les instruments entre les rendez-vous avec vos clients.

7 min


Il assure la réalisation de jusqu'à 50 cycles complets de stérilisation par jour.

Il vous aide à avoir des instruments stériles à portée de main à tout moment.

Il aide à réduire le nombre d'instruments chers dont vous pourriez avoir besoin.



Petit.
Mais spacieux.

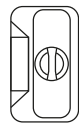


Il stérilise des instruments
emballés et non emballés.

Ultra compact avec un
délai court d'exécution.

Extrêmement intuitif: il suffit
d'appuyer sur l'écran tactile.

Classe B



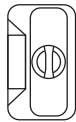

La sécurité dans la
lumière des projecteurs.

Il s'adapte parfaitement
à votre environnement
professionnel.

Il fonctionne silencieusement.
Vous le remarquerez à peine.

Il montre à vos clients
que vous prenez soin de
leur sécurité.





Fonctionnement intuitif



Qualité prouvée par des tests



Classe B


Enbio Care

Nous sommes là pour vous.



Garantie

Votre tranquillité d'esprit est ce qui compte le plus. Ceci est notre opinion.

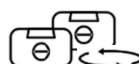

Continuité du travail

Vous aurez un appareil de remplacement pendant la durée de la réparation.

Cycle de stérilisation

Durée totale du processus

Pour

Séchage

**134°C
FAST**

7 min

Instruments non emballés, solides, pour utilisation immédiate

134°C

15 min

Tout type d'instruments, emballés ou non emballés

OUI

121°C

30 min

Instruments fragiles, avec des éléments de caoutchouc, textiles (masques, par exemple), emballés ou non emballés.

OUI



Caractéristiques techniques

Alimentation	220-230V AC/ 50/60Hz
Puissance installée	2250 W
Consommation maximale de courant	15A
Pression d'opération	2,1 Bar
Pression maximale	2,3 Bar
Température maximale du processus	131°C
Volume de la cuve de stérilisation	2,7l

Quantité max. de paquets (approximative)	8
8 Poids max. de la charge	0,5kg
Masse	15 kg
Degré de protection	IP20
Archivage de données	USB Drive
Conductivité de l'eau*	<15 µS/cm

*eau déminéralisée ou distillée uniquement

Certifications

Conformes aux exigences de la norme EN-ISO 13060 et de la Directive 93/42/EEC. Dispositif médical de classe IIb.