



Adaptateur Smartphone Segment Antérieur

QuikVue® VPA-100

Concept de design de produit

Il est reconnu que l'imagerie joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic ophtalmologique. QuikVue® est un adaptateur pour smartphone spécialement conçu pour l'imagerie du segment antérieur. Il fournit un grossissement 10x qui répond à la demande d'examen de la vue de base pour les optométristes, les médecins généralistes, les pédiatres, les vétérinaires, etc. La lentille optique spécialement conçue permet à QuikVue® de capturer des images antérieures claires pour l'examen de soins oculaires primaires et la télémédecine.

Applications cliniques



Contrôle oculaire général



Contrôle patient à mobilité réduite



Contrôle des patients enfants



Contrôle d'urgence



Contrôle des patients âgés



Contrôle des yeux animaux



Éclairage blanc et bleu

QuikVue® fournit un éclairage blanc et bleu. La LED blanche projette une lumière blanche chaude semblable à l'éclairage halogène d'une lampe à fente. Il existe deux niveaux d'éclairage blanc disponibles pour répondre aux différentes demandes de luminosité lors de l'examen. L'éclairage bleu peut être utilisé pour capturer des images de fluorescéine pour aider au diagnostic avec coloration cornéenne et ajustement des lentilles de contact, etc.




Conception de coussin d'air flexible

La conception innovante du coussin d'air permet de fixer QuikVue® sur la plupart des téléphones intelligents disponibles sur le marché.




Batterie rechargeable


Pour rendre la recharge électrique pratique, Qui-kVue® utilise une mini batterie rechargeable Li-ion. Il peut être rechargé via un câble USB. Il y a un indicateur d'état de recharge à l'arrière de l'appareil. Lorsque la recharge de courant est terminée, le voyant lumineux passe du rouge au vert.

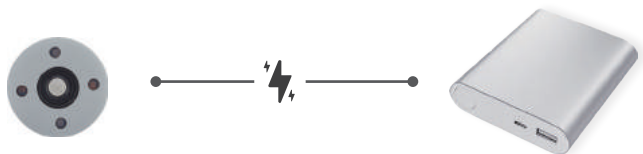


Galerie d'images

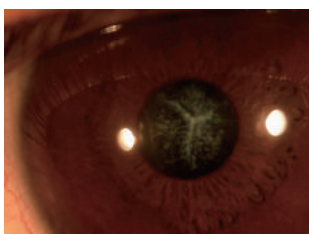


Cataracte

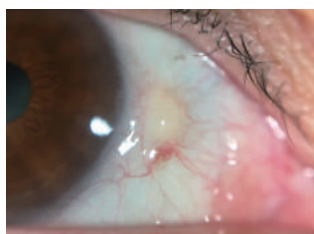

Pinguécula

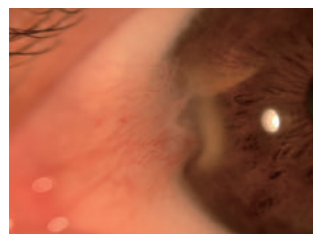

Ptérygion

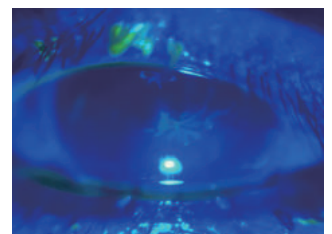

Ulcère cornéen
dendritique

Spécification

VPA-100

Grossissement	10X
Éclairage	Blanc (2 niveaux de luminosité), bleu cobalt
Capture d'image	Image fixe, vidéo
temps de travail	6 heures
Puissance	Batterie Li-ion rechargeable
Recharge	Câble micro USB
Dimension	44 x 44 x 35 (mm) (W/D/H)
Poids	30g

Détails d'emballage:



QuikVue® adaptateur



pochette de rangement



Câble micro USB



mode d'emploi



Shanghai VisuScience Meditech Co.,Ltd.

Add: No. 344 Sanlin Road, Pudong New Area, Shanghai, China

Sanotel

UN REGARD D'AVANCE SUR L'OPHTALMOLOGIE

83 rue Jacquard - L'Agora du Luberon
84120 Pertuis