


FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Division
instruments
meuleuses | réfraction | atelier & accessoires ●●●

tête de réfracteur HDR-9000

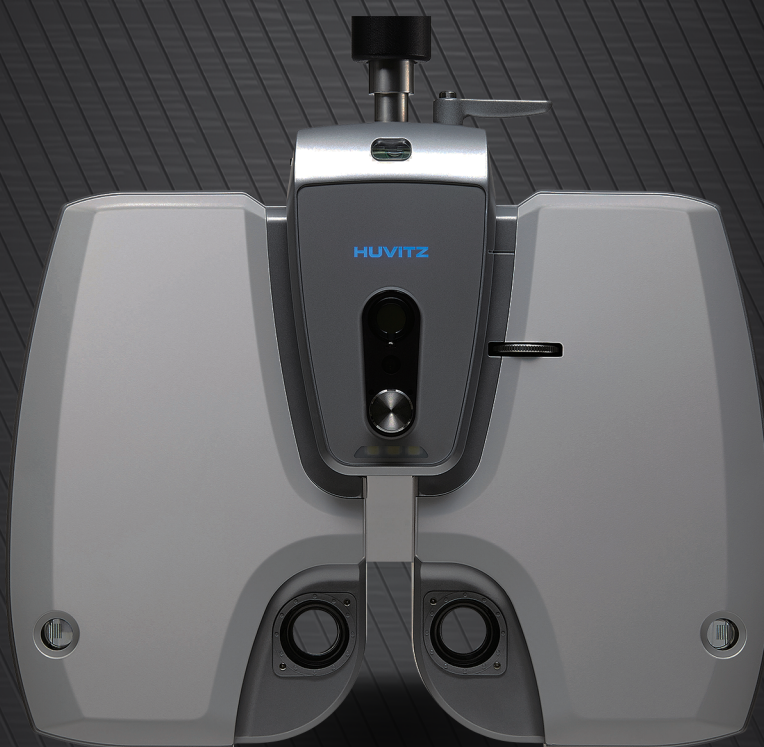


NOVACEL

● tête de refracteur

HDR-9000 *Huvitz*

Précision, systématisation et personnalisation.

Chargement rapide et silencieux de l'objectif :

Le chargement rapide des verres aide à minimiser l'accommodation et la fatigue visuelle lors de l'examen.



Réglage de la hauteur monoculaire :

Un examen personnalisé est disponible pour ceux qui ont des hauteurs monoculaires différentes avec un ajustement de +/- 3 mm



Corps Inclinaison en VP :

Lors de l'examen de vision de près, la tête de réfraction s'incline de 0° à 45° offrant la sensation de lire un livre.



Une grande variété de tests :

Plusieurs tests de vision disponibles : test de daltonisme, grille d'Amsler, etc...



Écran de contrôle & connectivités :

- Écran pivotant et inclinable pour un meilleur confort durant l'examen.
- Communication sans fil avec HRK-9000A et HLM-9000 via Wi-Fi
- Imprimante intégrée.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODE DE MESURE	Sphère	-29.00D ~+26.75D (régulier) -19.00D ~+16.75D (cylindre croisé ou test de prisme)
	Cylindre	0.00 ~±8.75D par pas de 0.25, 0.5, 1.00, 2.00, 3.00D
	Axe	0-180° (par pas de 1°)
	Ecart Pupillaire	Distance VP : 35.00-70.00 mm 48.00-80.00 mm (par pas de 0.5, 1.00 mm)
	Prismes rotatifs	0-20δ (par pas de 0.1, 0.3, 0.5, 1.00, 2.00δ)
	Cylindres croisés	±0.25D, ±0.50D, ±0.50D cylindre croisé double
VERRES COMPLEMENTAIRES	Verres rétinoscopiques	±1.5D, ±2.00D (distances de mesure : 67 cm, 50 cm)
	Trou sténopéique	Ø1 mm
	Maddox	Oeil D : rouge, horizontal / Oeil G : rouge, vertical
	Filtre rouge/vert	Oeil D : rouge / Oeil G : vert
	Filtre polarisant	Oeil D : 135°, 45° / Oeil G : 45°, 135°
	Prisme de dissocia-tion	Oeil D : 6Δ base supérieure Oeil G : 10Δ ; compléments au-dessus de 5Δ
	Cylindre croisé fixe	±0.50D (axe à 90°)

Septembre 2022



SIÈGE SOCIAL ET LABORATOIRE DE PRODUCTION

2, Centre d'Activités de La Moiserie BP 80160
02404 CHATEAU-THIERRY Cedex 04

INSTRUMENTS - Tél. : +33 (0) 323 838 888 (touche 4)



NOVACEL