



Otosopes et Ophtalmoscopes

Otoscopes et ophtalmoscopes Keeler

Perfection optique et design léger et ergonomique

Une combinaison de perfection optique, d'une excellente ergonomie et de caractéristiques polyvalentes font des otoscopes et des ophtalmoscopes de Keeler le choix idéal.



Caractéristiques principales

- **Convivialité pour le patient**
Avec des surfaces courbes et un marquage subtil du côté du patient, chaque ophtalmoscope a été conçu pour s'adapter parfaitement à l'os orbital, ce qui en fait un instrument convivial et non menaçant pour le patient.
- **Un otoscope adapté à vos besoins**
La gamme d'otoscopes de Keeler va du nouvel otoscope de poche Jazz Ultra « passe partout » à l'exceptionnel otoscope à fibre optique haut de gamme, tous offrant la meilleure vue possible.
- **Confiance Keeler**
Fabriqué au Royaume-Uni et construit à partir de matériaux légers et résistants, un instrument Keeler vous offrira de nombreuses années de service sans problème et résistera aux contraintes d'une utilisation quotidienne. Ainsi, quels que soient vos besoins, de l'examen de base au diagnostic détaillé, Keeler a l'instrument qu'il vous faut.

Les ophtalmoscopes Keeler sont désormais disponibles avec une source lumineuse LED, offrant un éclairage blanc et brillant et une durée de vie des batteries 3 fois plus longue.



Ouvertures, graticules et filtres

	GRAND ANGLE - Illumine la plus grande surface du fond d'œil pour un meilleur diagnostic général à travers une pupille dilatée.
	INTERMÉDIAIRE - Accès plus facile à travers les pupilles non dilatées et en examen périphérique. Idéal pour les examens pédiatriques.
	MACULAIRE - Pour l'examen de la région maculaire du fond de l'œil lorsqu'un faisceau plus large entraînerait une réaction pupillaire excessive ou une gêne pour le patient.
	FENTE - Pour déterminer les élévations et les dépressions de la rétine, peut également être utilisée pour évaluer la profondeur de la chambre antérieure.
	GLAUCOME - Projette un graticule sur la rétine pour évaluer le rapport cupule/disque optique comme aide au diagnostic du glaucome.
	CROIX DE FIXATION - Projette un graticule sur la rétine pour évaluer le degré et la direction de la fixation excentrique.
	ÉLIMINATION DU ROUGE ET CROIX DE FIXATION - Pour l'examen des vaisseaux avec une croix de fixation pour l'évaluation de la fixation excentrique.
	SEMI-CIRCULAIRE - Offre une combinaison de perception de la profondeur et de champ de vision.
	ÉLIMINATION DU ROUGE - Utilisé pour examiner les vaisseaux sanguins dans les moindres détails. Les vaisseaux sanguins sont représentés en silhouette noire sur un fond vert foncé.
	BLEU DE COBALT - Est utilisé en conjugaison avec la coboration à la fluorescéine l'examen des cicatrices et abrasions de la cornée.

Aperçu et utilisation prévue

L'ophtalmoscope Keeler est indiqué pour l'examen du segment postérieur de l'œil, appelé fond de l'œil, afin d'aider au dépistage et au diagnostic des pathologies rétinienne, y compris, mais sans s'y limiter, des maladies telles que la cataracte, l'œdème papillaire, la cupule discale glaucomateuse, la rétinopathie diabétique, la rétinopathie hypertensive et les décollements de la rétine. Réglé sur une puissance et un grossissement élevés, il peut également être utilisé pour examiner le segment antérieur de l'œil, qui comprend les paupières, la cornée, la sclérotique, la conjonctive, l'iris, l'humeur aqueuse, le cristallin et le vitré antérieur.

L'otoscope Keeler est indiqué pour l'examen de la bonne santé du conduit auditif externe, de la membrane tympanique et de l'oreille moyenne. L'otoscope peut aider à détecter les affections de l'oreille, y compris, mais sans s'y limiter, les maux d'oreille, les infections de l'oreille, la perte d'audition, les bourdonnements d'oreille, les inflammations et les corps étrangers.

Jazz Ultra

Il se glisse parfaitement dans votre poche et ne nécessite qu'une seule pile AA.

Caractéristiques principales

Otoscope Jazz Ultra

- Lotoscope à fibre optique n'utilise qu'une seule pile AA
- Le châssis de l'optique, de conception nouvelle, offre une meilleure qualité optique et une plus grande précision de l'éclairage
- L'éclairage LED brillant dure plus de 20 000 heures, sur la base de 4 heures d'utilisation par jour
- Lentille grossissante 3 x

Ophthalmoscope Jazz Ultra

- L'éclairage LED brillant et l'optique Keeler éprouvée offrent les vues les plus claires et les plus nettes de la rétine
- Puissances des lentilles +/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 et 20 dioptries
- Molette à ouvertures lisse pour une sélection précise des ouvertures
- Protège vos lunettes
- Une seule pile AA est nécessaire

Ensemble de diagnostic Jazz Ultra

- Instruments Jazz Ultra dans un emballage pratique avec deux poignées



Références

Otoscopes et Ophthalmoscopes Jazz Ultra

- 1514-P-1187 Otoscope Pocket Jazz Ultra 2,8 V
- 1102-P-1113 Ophthalmoscope Pocket Jazz Ultra 2,8 V
- 1702-P-1109 Ensemble de diagnostic Pocket Jazz Ultra 2,8 V



Jazz

Instruments de poche de taille originale Jazz fournis avec trois anneaux de couleur interchangeables.

Caractéristiques principales

Otoscope Jazz


- Otoscope à fibre optique
- L'éclairage LED brillant offre la meilleure vue possible et une plus longue durée de vie de la batterie pour un produit plus écologique
- Lentille grossissante 3 x

Ophthalmoscope Jazz

- Éclairage LED brillant
- Gamme de puissances de +/- 20D
- Optiques Keeler réputées et performantes dotées d'une lentille asphérique

Ensemble de diagnostic Jazz

- Instruments Jazz dans un emballage pratique avec deux poignées.

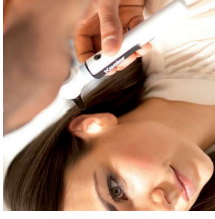

Références

Otoscopes et Ophthalmoscopes Jazz

- 1514-P-1160 Otoscope Pocket Jazz LED 2,8 V
- 1102-P-1105 Ophthalmoscope Pocket Jazz LED 2,8 V
- 1702-P-1096 Ensemble de diagnostic Pocket Jazz LED 2,8 V



Standard

La norme industrielle pour les services et les médecins généralistes. L'otoscope Standard est idéal pour les tests pneumatiques.

Caractéristiques principales

Otoscope Standard

- Conception à tête fermée particulièrement adaptée aux essais pneumatiques
- Loupe 2,5x amovible pour permettre l'introduction de petits instruments
- Spéculum jetables fournis

Ophtalmoscope Standard

- La molette à action positive de la lentille vous permet de cliquer sur les puissances de lentille de +40D à -25D, permettant un examen détaillé des structures oculaires et une facilité d'utilisation pour les porteurs de lunette
- Deux faisceaux de diagnostic : un faisceau grand angle pour un examen général et un faisceau maculaire pour un examen plus détaillé de la rétine centrale
- Un filtre d'élimination du rouge pour un examen amélioré des vaisseaux peut être utilisé avec les deux faisceaux de diagnostic, particulièrement utile pour l'évaluation et le suivi du diabète
- L'appui frontal souple intégré permet un positionnement facile et protège vos verres si vous portez des lunettes

Ensemble de diagnostic Standard

- Les instruments Standard dans un emballage pratique.



Références

Otoscopes et Ophtalmoscopes Standard

1518-P-1001	Otoscope Standard Slimline 2,8 V	●
1518-P-1002	Otoscope Standard Slimline 3,6 V	●
1126-P-1005	Ophtalmoscope Standard 2,8 V dans son étui	●
1126-P-1006	Ophtalmoscope Standard 3,6 V dans son étui	●
1126-P-1013	Tête d'ophtalmoscope Standard LED emballée dans un carton	●
1126-P-1011	Ophtalmoscope Standard LED 2,8 V dans son étui	●
1126-P-1012	Ophtalmoscope Standard LED 3,6 V dans son étui	●
1126-P-5005	Ophtalmoscope Standard + Module LED	●

Ensembles de diagnostic

1729-P-1018	Ensemble Standard Slimline 2,8 V	●
1729-P-1022	Ensemble de diagnostic Standard Slimline 3,6 V	●
1729-P-1048	Ensemble de diagn. Ophtalmo / oto Standard LED 2,8 V	●
1729-P-1049	Ensemble de diagn. Ophtalomo. / oto Standard LED 3,6 V	●

Accessoires

1015-P-7031	Ampoule halogène 2,8 V pour otoscope Std Lot de 2	●
1015-P-7023	Ampoule halogène 3,6 V pour otoscope Std Lot de 2	●
1011-P-7106	Ampoule xénon 2,8 V Std/Pract/Prof Lot de 2	●
1011-P-7114	Ampoule xénon 3,6 V Std/Pract/Prof Lot de 2	●
1011-P-5610	Ensemble ophtalmoscope LED	●



Standard
Ensemble de diagnostic

Source de lumière LED

Standard/Pocket
Ampoule otoscope

Ampoule ophtalmoscope
Practitioner/Standard

Practitioner

Le choix du spécialiste des soins primaires. L'otoscope Practitioner a un design ouvert pour une utilisation facile.

Caractéristiques principales

Otoscope Practitioner

- Tête ouverte non obstruée permettant d'introduire facilement de petits instruments pour l'élimination de la cire ou de tout autre corps étranger
- Grande lame à côté de la lentille 2,5x pour une vision claire des structures auditives et des procédures sous grossissement
- Possibilité d'effectuer des essais pneumatiques pour la mobilité du tympan
- Spéculum jetables fournis

Ophtalmoscope Practitioner

- La molette à action positive de la lentille vous permet de sélectionner une gamme de puissances de lentille allant de +40D à -25D pour un examen détaillé des structures oculaires et une facilité d'utilisation pour les porteurs de lunettes
- Comprend 6 faisceaux pour une capacité de diagnostic complète et un filtre bleu, particulièrement utile pour évaluer les irrégularités cornéennes chez les enfants
- Un filtre d'élimination du rouge pour un examen amélioré des vaisseaux peut être utilisé avec les deux faisceaux de diagnostic, idéal pour l'évaluation et le suivi du diabète
- Appui frontal intégral souple pour les porteurs de lunettes

Ensemble de diagnostic Practitioner

- Les instruments Practitioner dans un emballage pratique.



Ensemble de diagnostic
Practitioner

Source de lumière LED

Références

Otoscopes et Ophtalmoscopes Practitioner

1519-P-1001	Otoscope Practitioner Slimline 2,8 V	●
1519-P-1002	Otoscope Practitioner 3,6 V dans son étui	●
1127-P-1005	Ophtalmoscope Practitioner 2,8 V dans son étui	●
1127-P-1006	Ophtalmoscope Practitioner 3,6 V dans son étui	●
1127-P-1010	Tête LED Practitioner dans un emballage carton	●
1127-P-1008	Ophtalmoscope Practitioner LED 2,8 V dans son étui	●
1127-P-1009	Ophtalmoscope Practitioner LED 3,6 V dans son étui	●
1127-P-5003	Ophtalmoscope Practitioner + Module LED	●

Ensembles de diagnostic

1729-P-1019	Ensemble de diagnostic Practitioner Slimline 2,8 V	●
1729-P-1023	Ensemble de diagnostic Practitioner Slimline 3,6 V	●
1729-P-1050	Ensemble de diag. ophtalmo / oto Practitioner LED 2,8 V	●
1729-P-1051	Ensemble de diag. ophtalmo / oto Practitioner LED 3,6 V	●

Accessoires

1015-P-7066	Ampoule halogène 2,8 V pour otoscope Fibre optique Lot de 2	●
1015-P-7058	Ampoule halogène 3,6 V pour otoscope Fibre optique Lot de 2	●
1011-P-7106	Ampoule xénon 2,8 V Std/Pract/Prof Lot de 2	●
1011-P-7114	Ampoule xénon 3,6 V Std/Pract/Prof Lot de 2	●
1011-P-5610	Ensemble ophtalmoscope LED	●



Otoscope à fibre optique

Conçu pour une vue non obstruée.



Caractéristiques principales

- Véritable éclairage halogène transmis par des fibres optiques pour un éclairage homogène permettant un diagnostic clair et précis des images auditives
- Conception de la tête large pour une vue sans obstruction
- Système à tête fermée parfaitement adapté aux essais pneumatiques de mobilité tympanique
- Grand coulisseau à côté de la lentille grossissante 2,5x pour une vue claire et les structures auditives et les procédures d'élimination de la cire et des corps étrangers sous grossissement
- Spéculum jetables fournis

Ensemble de diagnostic à fibre optique

- Les instruments Fibre Optic dans un emballage pratique



Ensemble de diagnostic Practitioner/Fibre optique

Les poignées Slimline offrent des options de piles sèches de 2,8V ou de batteries rechargeables au lithium de 3,6V

- 2,8 V (base bleue)
- 3,6 V (base rouge)

Lorsque vous commandez 3,6 V, vous avez besoin d'un chargeur Keeler au lithium, mini ou double



Source de lumière LED



Ampoule otoscope Practitioner/Vista/Fibre optique

Références

Otoscopes à fibre optique	
1514-P-1136	Otoscope à fibre optique Slimline 2,8 V dans son étui
1514-P-1144	Otoscope à fibre optique Slimline 3,6 V dans son étui
Ensembles de diagnostic	
1729-P-1020	Practitioner/Fibre optique Slimline 2,8 V Ensemble de diagnostic
1729-P-1024	Practitioner/Fibre optique Slimline 3,6 V Ensemble de diagnostic
1729-P-1041	Ensemble de diagnostic Standard/Fibre optique 2,8 V
1729-P-1052	Ensemble de diagnostic Standard LED/Fibre optique 2,8 V
1729-P-1053	Ensemble de diag.Practitioner LED/Fibre optique 2,8 V
1729-P-1054	Ensemble de diagnostic Practitioner LED/Fibre optique 3,6 V
Accessoires	
1015-P-7066	Ampoule halogène 2,8 V pour otoscope Fibre optique Lot de 2
1015-P-7058	Ampoule halogène 3,6 V pour otoscope Fibre optique Lot de 2
1011-P-7106	Ampoule xénon 2,8 V Std/Pract/Prof Lot de 2
1011-P-7114	Ampoule xénon 3,6 V Std/Pract/Prof Lot de 2
1011-P-5610	Ensemble optalmoscope LED

Pocket

Idéal pour le praticien en déplacement et l'utilisation à domicile.



Caractéristiques principales

Otoscope Pocket


- Idéal pour une utilisation à domicile, en service ou comme deuxième instrument
- Conception à tête fermée particulièrement adaptée aux essais pneumatiques
- Loupe 2,5x amovible pour permettre l'introduction de petits instruments
- Spéculum jetables fournis
- Sécurité assurée par le solide clip de poche en métal
- Les instruments Pocket sont alimentés par des piles AA standard

Optalmoscope Pocket

- Une capacité de diagnostic complète dans un instrument de poche
- Idéal pour une utilisation à domicile, en service ou comme deuxième instrument
- Sécurité assurée par le solide clip de poche en métal
- Un total de 6 faisceaux de diagnostic
- Les instruments Pocket sont alimentés par des standard piles AA standard

Ensemble de diagnostic Pocket

- Des instruments de poche dans un emballage pratique

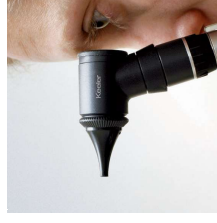

Ensemble de diagnostic Pocket


Références

Instruments Pocket

1503-P-1034	Otoscope Pocket dans son étui 2,8 V
1102-P-1033	Tête d'optalmoscope Pocket 2,8 V emballée dans un carton
1102-P-1041	Optalmoscope Pocket 2,8 V
1702-P-1037	Ensemble Pocket 2,8 V

Accessoires

1015-P-7031	Ampoule halogène 2,8 V pour otoscope Std Lot de 2
1011-P-7050	Ampoule halogène 2,8 V pour optalmoscope Pocket Lot de 2

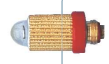

Ampoule otoscope Standard/Pocket



Ampoule pour optalmoscope Pocket




Greenlight 300

Unité murale de diagnostic et spéculum jetables A

Modèles compacts à montage mural Idéal pour une utilisation en service ou en chirurgie.



Unité murale de diagnostic
Greenlight 300

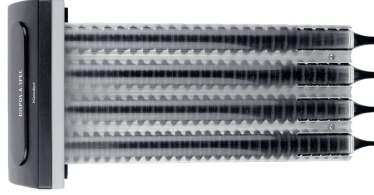

Distributeur de
spéculum jetables

Caractéristiques principales

- Unité murale de diagnostic Greenlight 300
- La conception de l'affichage permet une mesure à 2 mmHg près
- Précision meilleure que $\pm 1/3$ 3mmHg
- Étalonnage automatique
- Autonomie prolongée de 170 heures en utilisation continue, avec indicateur de batterie faible

Distributeur de spéculum jetables A

- Ajoutez à votre unité murale Keeler (voir page 10)
- Le distributeur est livré rempli de 25 spéculum jetables de 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm et 5,5 mm
- Le couvercle peut être facilement retiré pour insérer de nouveaux spéculum
- Design moderne et robuste assorti à toutes les unités murales Keeler

Références

Greenlight 300 et spéculum jetables A

1964-P-2020	Kit mural de diagnostic intégré - Accoson
1964-P-1006	Genmed/spéculum jetables A et support
1964-P-2000	Unité de distribution de spéculum

Unités murales et ensembles de bureau de diagnostic

Léger, lumineux et durable avec une construction robuste pour les environnements très fréquentés.

Caractéristiques principales

Ensembles d'unités murales de diagnostic

- Les ophtalmoscopes et otoscopes antivol de Keeler sont équipés d'une tête et d'une poignée verrouillables, de sorte que vous les retrouverez toujours là où vous les avez laissés
- Conception compacte à montage mural, idéale pour les services, les cabinets médicaux, les salles de consultation et les salles d'urgence
- Le câble solide et sans fil permet d'utiliser l'instrument jusqu'à trois mètres du transformateur
- La construction robuste est parfaitement adaptée aux conditions de travail les plus difficiles
- Éclairage automatique lorsque les instruments sont retirés du socle avec confirmation par LED
- Les ensembles filaires sont constitués d'un ophtalmoscope, d'un otoscope et d'une alimentation par poignée double
- Un distributeur de spéculum jetables A peut être ajouté à votre ensemble (voir page 10 pour plus de détails)

Ensembles de bureau rechargeables

- Disponible avec la gamme d'ophtalmoscopes et d'otoscopes Keeler
- Peut être monté sur un bureau ou sur un mur selon vos besoins
- Le nouveau design compact et moderne est idéal pour un montage mural et donc pour les services, la chirurgie, les salles de consultation et les salles d'urgence
- La construction robuste est adaptée aux conditions de travail les plus difficiles
- La technologie ion-lithium offre plus de 2 heures d'utilisation continue et une charge rapide de 2 heures
- Des diodes LED indiquent si la batterie est faible, en cours de chargement ou complètement chargée



Ensemble d'unités murales de diagnostic

Ensemble de bureau rechargeable


Références

Ensembles d'unités murales de diagnostic

1964-P-2003	Ensemble de diagnostic Standard 3,6 V
1964-P-2002	Ensemble de diagnostic Practitioner 3,6 V
1964-P-2004	Ensemble de diagnostic Practitioner/Fibre optique 3,6 V

Ensembles de bureau rechargeables

1729-P-1029	Ensemble pour bureau Standard 3,6 V
1729-P-1028	Ensemble pour bureau Practitioner 3,6 V
1729-P-1030	Ensemble pour bureau Practitioner/Fibre Optique 3,6 V
1729-P-1055	Ensemble pour bureau Standard LED 3,6 V
1729-P-1056	Ensemble pour bureau Practitioner LED 3,6 V
1729-P-1057	Ensemble pour bureau Practitioner LED / Fibre optique 3,6 V

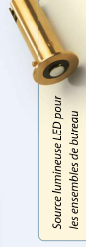

Source lumineuse LED pour les ensembles de bureau

Systèmes de chargement

Chargez vos instruments Keeler en toute élégance.

Caractéristiques principales

Double chargeur lithium-ion

- Le chargeur compact prend deux poignées et s'intègre parfaitement dans votre environnement de test immédiat, permettant un accès facile à vos instruments tenus en main. Il peut être posé sur une table ou fixé au mur
- Charge rapide en 2 heures
- Elle a une autonomie de plus de 2 heures, en utilisation continue
- Des diodes LED indiquent si la batterie est faible, en cours de chargement ou complètement chargée

Mini chargeur au lithium-ion

- Le mini chargeur Lithium-ion peut être connecté rapidement et simplement à la base de votre poignée Keeler, ce qui en fait le choix idéal pour les visites à domicile ou les praticiens en déplacement.
- Charge rapide en 2 heures
- Elle a une autonomie de plus de 2 heures, en utilisation continue
- Possibilité d'utiliser l'instrument tout en rechargeant la batterie
- Des diodes LED indiquent si la batterie est faible, en cours de chargement ou complètement chargée



Batterie lithium-ion

Références

Systèmes de chargement

1941-P-1368	Chargeur double au lithium
1941-P-1341	Mini chargeur au lithium
EP39-18918	Batterie au lithium 3.6 V

Poignées à code couleur

1901-P-7028	Manche Slimline - Rose
1901-P-7036	Manche Slimline - Vert
1901-P-7044	Manche Slimline - Bleu
EP39-05365	Manche Slimline - Noir
1901-P-7052	Couleurs assorties pour les manches Slimline

poignées à code couleur disponibles



Ajoutez une touche de couleur à votre zone de diagnostic et personnalisez vos instruments avec des poignées à code couleur.

Choisissez parmi le rose, le vert, le bleu ou le noir. Disponibles en paquet de 4 assortis ou à l'unité.



Spéculum de rechange



Spéculum Jazz Ultra/Jazz




Références

Spéculum pour otoscope Jazz Ultra/Jazz - paquet de 10

1514-P-7036	Spéculum réutilisables Jazz 2 mm (paquet de 10)
1514-P-7044	Spéculum réutilisables Jazz 2.5 mm (paquet de 10)
1514-P-7052	Spéculum réutilisables Jazz 3 mm (paquet de 10)
1514-P-7060	Spéculum réutilisables Jazz 4 mm (paquet de 10)
1514-P-7079	Spéculum réutilisables Jazz 5 mm (paquet de 10)
Paquet de 100	
1514-P-7087	Spéculum Jazz 2 mm (paquet de 100)
1514-P-7095	Spéculum Jazz 2.5 mm (paquet de 100)
1514-P-7108	Spéculum Jazz 3 mm (paquet de 100)
1514-P-7116	Spéculum Jazz 4 mm (paquet de 100)
1514-P-7124	Spéculum Jazz 5 mm (paquet de 100)

1. Identifiez le style de votre spéculum existant
2. Mesurez le diamètre

Spéculum Standard, Practitioner, Pocket, Vista, Fibre Optic, Medic

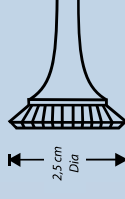

1512-P-7008	Spéculum n° 1
1512-P-7016	Spéculum n° 2
1512-P-7024	Spéculum n° 3
1512-P-7032	Spéculum n° 4
1512-P-7040	Spéculum n° 5
1599-P-7229	Ensemble de spéculum permanents

Jetable

Utilisation sans adaptateur



1513-P-7026	Spéculum jetables (sans adaptateur)
1501-P-5197	Sachet de 500 spéculum n° 1 (2,5 mm)
1501-P-5170	Sachet de 500 spéculum n° 2
1501-P-5218	Sachet de 500 spéculum n° 3 (4,5 mm)
1501-P-5189	Sachet de 500 spéculum n° 4
1599-P-7229	Ensemble de spéculum permanents

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Jazz Ultra

1514-P-1187 OTOSCOPE POCKET JAZZ ULTRA 2,8 V	• Ootoscope avec poignée courte • Spéculum de 2,5 mm et 4 mm (Jazz uniquement) • Anneau de verrouillage bleu • Anneau de verrouillage rose • Pochette de transport • Instructions pour l'utilisateur
1102-P-1113 OPHTALMOSCOPE POCKET JAZZ ULTRA 2,8 V	• Ootoscope avec poignée courte • Anneau de verrouillage bleu • Anneau de verrouillage rose • Pochette de transport • Instructions pour l'utilisateur
1702-P-1109 ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC POCKET JAZZ ULTRA 2,8V	• Ophthalmoscope avec poignée courte • Ootoscope avec poignée courte • Spéculum de 2,5 mm et 4 mm (Jazz uniquement) • 2x Anneau de verrouillage bleu • 2x Anneau de verrouillage rose • Pochette de transport • Instructions pour l'utilisateur

Jazz

1514-P-1160 OTOSCOPE POCKET JAZZ LED 2,8 V	• Ootoscope avec poignée • Spéculum de 2,5 mm et 4 mm (Jazz uniquement) • Anneau de verrouillage bleu • Anneau de verrouillage rose • Pochette de transport • Instructions pour l'utilisateur
1102-P-1105 OPHTALMOSCOPE POCKET JAZZ LED 2,8 V	• Ophthalmoscope avec poignée • Anneau de verrouillage bleu • Anneau de verrouillage rose • Pochette de transport • Instructions pour l'utilisateur
1702-P-1096 ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC POCKET JAZZ LED 2,8V	• Ophthalmoscope avec poignée • Ootoscope avec poignée • Spéculum de 2,5 mm et 4 mm (Jazz uniquement) • 2x Anneau de verrouillage bleu • 2x Anneau de verrouillage rose • Pochette de transport • Instructions pour l'utilisateur

Standard

1518-P-1001 OTOSCOPE STANDARD SLIMLINE 2,8 V	• Ootoscope Standard avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange • Extracteur d'ampoules • 1x Spéculum 1-5 • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1518-P-1002 OTOSCOPE STANDARD SLIMLINE 3,6 V	• Ootoscope Standard avec ampoule halogène • Batterie au lithium • Ampoule halogène de rechange • Extracteur d'ampoules • 1x Spéculum 1-5 • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1126-P-1005 OPHTALMOSCOPE STANDARD 2,8 V	• Ophthalmoscope Standard avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1126-P-1006 STANDARD 3,6 V OPHTALMOSCOPE	• Ophthalmoscope Standard avec ampoule halogène • Batterie au lithium • Ampoule halogène de rechange • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1126-P-1013 LED STANDARD TÊTE OPHTALMOSCOPE	• Tête ophthalmoscope Standard à LED • Instructions pour l'utilisateur USB
1126-P-1011 OPHTALMOSCOPE STAN- DARD à LED 2,8 V	• Ophthalmoscope Standard à LED • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1126-P-1012 OPHTALMOSCOPE STAN- DARD LED 3,6 V	• Ophthalmoscope Standard à LED • Batterie au lithium • Étui • Instructions pour l'utilisateur

Ensembles de diagnostic Standard

1729-P-1018 SLIMLINE 2,8 V ENSEMBLE STANDARD	• Ophthalmoscope Standard avec am-poule halogène (Tête seulement) • Ootoscope Standard avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange pour ophthalmoscope • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
1729-P-1022 SLIMLINE 3,6 V STANDARD ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC	• Ophthalmoscope Standard avec am-poule halogène (Tête seulement) • Ootoscope Standard avec ampoule halogène • Batterie au lithium • Ampoule halogène de rechange pour ophthalmoscope • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
1729-P-1048 ENSEMBLE DE DIAGNOS- TIC OPHTA / OTO STANDARD LED 2,8 V	• Ophthalmoscope Standard avec am-poule LED (Tête seulement) • Ootoscope Standard avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
1729-P-1049 ENSEMBLE DE DIAGNOS- TIC OPHTA / OTO STANDARD LED 3,6 V	• Ophthalmoscope Standard avec ampoule LED (Tête seulement) • Ootoscope Standard avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • Batterie au lithium • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur

Practitioner

1519-P-1001 SLIMLINE 2,8 V OTOSCOPE PRACTITIONNER	• Ootoscope Practitioner avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange • Extracteur d'ampoules • Chambre étanche à l'air-ATC Mac • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spéculum jetables • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1519-P-1002 SLIMLINE 3,6 V OTOSCOPE PRACTITIONNER	• Ootoscope Practitioner avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange • Batterie au lithium • Extracteur d'ampoules • Chambre étanche à l'air-ATC Mac • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spéculum jetables • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1127-P-1005 OPHTALMOSCOPE PRACTITIONNER 2,8 V DANS SON ÉTUI	• Ophthalmoscope Practitioner avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1127-P-1006 PRACTITIONNER 3,6 V OPHTALMOSCOPE DANS SON ÉTUI	• Ophthalmoscope Practitioner avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange • Batterie au lithium • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1127-P-1010 TÊTE LED PRACTITIONNER DANS UN EMBALLAGE CARTON	• Ophthalmoscope Practitioner à LED (Tête seulement) • Instructions pour l'utilisateur
1127-P-1008 OPHTALMOSCOPE PRACTITIONNER LED 2,8 V DANS SON ÉTUI	• Ophthalmoscope Practitioner LED • Mallette • Instructions pour l'utilisateur
1127-P-1009 OPHTALMOSCOPE PRACTITIONNER LED 3,6 V DANS SON ÉTUI	• Ophthalmoscope Practitioner LED • Batterie au lithium • Étui • Instructions pour l'utilisateur

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Ensemble de diagnostic Practitioner

1729-P-1019 SLIMLINE 2,8 V ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC PRACTITIONNER	• Ophthalmoscope Practitioner avec ampoule halogène (Tête seulement) • Oscope Practitioner avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange pour ophthalmoscope • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
1729-P-1023 ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC PRACTITIONNER	• Ampoule halogène de rechange pour ophthalmoscope • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur

1729-P-1050 ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC OPHTALMO / OTO PRACTITIONNER LED 2,8 V	• Ophthalmoscope Practitioner à LED (Tête seulement) • Oscope Practitioner avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
--	---

1729-P-1051 ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC OPHTALMO / OTO PRACTITIONNER LED 3,6 V	• Ophthalmoscope Practitioner à LED (Tête seulement) • Oscope Practitioner avec ampoule halogène • Batterie au lithium • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
--	---

1729-P-1024 SLIMLINE 3,6 V ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC PRACTITIONNER / FIBRE OPTIQUE	• Ampoule halogène de rechange pour ophthalmoscope • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
--	---

Otoscope à fibre optique

1514-P-1136 SLIMLINE 2,8 V OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE DANS SON ÉTUI	• Otoscope à fibre optique avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spécimens jetables • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Étui • Instructions pour l'utilisateur
1514-P-1144 SLIMLINE 3,6 V OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE DANS SON ÉTUI	• Otoscope à fibre optique avec ampoule halogène • Batterie au lithium • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spécimens jetables • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Étui • Instructions pour l'utilisateur

Ensembles de diagnostic à fibre optique

1729-P-1020 SLIMLINE 2,8 V ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC PRACTITIONNER / FIBRE OPTIQUE	• Ophthalmoscope Practitioner avec ampoule halogène (Tête seulement) • Otoscope à fibre optique avec ampoule halogène • Halogène de rechange • Ampoule ophthalmoscope pour otoscope • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
--	--

1729-P-1024 SLIMLINE 3,6 V ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC PRACTITIONNER / FIBRE OPTIQUE	• Ophthalmoscope Practitioner avec ampoule halogène (Tête seulement) • Otoscope à fibre optique avec ampoule halogène • Batterie au lithium • Ampoule halogène de rechange pour ophthalmoscope • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
--	---

Sets de diagnostic à fibre optique (suite)

1729-P-1041 ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC FIBRE OPTIQUE/ STANDARD 2,8 V	• Ophthalmoscope Standard avec ampoule halogène (Tête seulement) • Otoscope à fibre optique avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange pour ophthalmoscope • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
---	---

1729-P-1052 ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC FIBRE OPTIQUE/ STANDARD LED 2,8 V	• Otoscope à fibre optique avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
---	---

1729-P-1053 PRACTITIONNER 2,8 V ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC À FIBRE OPTIQUE/LED	• LED Practitioner • Ophthalmoscope (Tête seulement) • Otoscope à fibre optique avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
---	--

1729-P-1054 ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC PRACTITIONNER À FIBRE OPTIQUE /LED 3,6 V	• Ophthalmoscope Practitioner à LED (Tête seulement) • Otoscope à fibre optique avec ampoule halogène • Batterie au lithium • Ampoule halogène de rechange pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
--	--

Pocket

1503-P-1034 OTOSCOPE POCKET DANS SON ÉTUI 2,8 V	• Oscope Pocket avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spécimens jetables • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Extracteur d'ampoules • Étui • Instructions pour l'utilisateur de l'unité de poche
--	--

1102-P-1033 POCKET 2,8 V TÊTE D'OPHTALMOSCOPE EMBALLÉE EN CARTON	• Ophthalmoscope Pocket avec ampoule halogène (Tête seulement) • Instructions pour l'utilisateur
---	--

1102-P-1041 OPHTALMOSCOPE POCKET 2,8 V	• Ophthalmoscope Pocket avec ampoule halogène • Ampoule halogène de rechange • Étui • Instructions pour l'utilisateur
---	---

1702-P-1037 ENSEMBLE POCKET 2,8 V	• Oscope Pocket avec ampoule halogène • Ophthalmoscope Pocket avec ampoule halogène (Tête seulement) • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spécimens jetables • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Extracteur d'ampoules • Étui • Instructions pour l'utilisateur de l'unité de poche
--	--

Unité murale

1964-P-2000	• Distributeur de spécimens • Spécimens jetables 25x 2,5, 3,5, 4,5 et 5,5 mm • Support mural et chevilles/vis associées • Clé hexagonale de 2 mm à extrémité sphérique • Instructions pour l'utilisateur de l'unité de poche
--------------------	--

Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Ensembles d'unités murales de diagnostic

1964-P-2003 ENSEMBLE DE DIAGNOSTIC STANDARD 3,6 V	• Ophtalmoscope Standard avec ampoule halogène • Oscope Standard avec ampoule halogène • Montage mural • Alimentation électrique avec poignée à double cordon • Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope • Ampoule halogène de recharge pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Tube de spécimens jetables • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Instructions pour l'utilisateur
	• Ophtalmoscope Practitioner avec ampoule halogène • Oscope Practitioner avec ampoule halogène • Montage mural • Alimentation électrique avec poignée à double cordon • Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope • Ampoule halogène de recharge pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Extracteur d'ampoules • Tube de spécimens jetables • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Instructions pour l'utilisateur

1964-P-2002

KIT DE DIAGNOSTIC PRACTITIONNER 3,6 V

- Ophtalmoscope Standard avec ampoule halogène
- Oscope Standard avec ampoule halogène
- Montage mural
- Alimentation électrique avec poignée à double cordon
- Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Extracteur d'ampoules
- Tube de spécimens jetables
- Adaptateur pour insufflateur d'otoscope
- Instructions pour l'utilisateur

- Ophtalmoscope Practitioner avec ampoule halogène
- Oscope à fibre optique avec ampoule halogène
- Montage mural
- Alimentation électrique avec poignée à double cordon
- Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Extracteur d'ampoules
- Tube de spécimens jetables
- Adaptateur pour insufflateur d'otoscope
- Instructions pour l'utilisateur

1964-P-2004

KIT DE DIAGNOSTIC PRACTITIONNER À FIBRE OPTIQUE 3,6 V

- Ophtalmoscope Standard avec ampoule halogène
- Oscope Standard avec ampoule halogène
- Montage mural
- Alimentation électrique avec poignée à double cordon
- Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Extracteur d'ampoules
- Tube de spécimens jetables
- Adaptateur pour insufflateur d'otoscope
- Instructions pour l'utilisateur

- Ophtalmoscope Practitioner avec ampoule halogène
- Oscope à fibre optique avec ampoule halogène
- Montage mural
- Alimentation électrique avec poignée à double cordon
- Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Extracteur d'ampoules
- Tube de spécimens jetables
- Adaptateur pour insufflateur d'otoscope
- Instructions pour l'utilisateur

Ensembles de bureau rechargeables

1729-P-1029 ENSEMBLE POUR BUREAU STANDARD 3,6 V	• Ophtalmoscope Standard avec ampoule halogène • Oscope Standard avec ampoule halogène • 2x Batterie au lithium • Chargeur double au lithium et câble d'alimentation • Kit de fixation murale pour chargeur double • Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope • Ampoule halogène de recharge pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spécimens jetables • Extracteur d'ampoules • Adaptateur pour insufflateur d'otoscope • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
	• Ophtalmoscope Practitioner avec ampoule halogène • Oscope Practitioner avec ampoule halogène • 2x Batterie au lithium • Chargeur double au lithium et câble d'alimentation • Kit de fixation murale pour chargeur double • Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope • Ampoule halogène de recharge pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spécimens jetables • Extracteur d'ampoules • Chambre étanche à l'air-ATC Mac • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur

1729-P-1028

ENSEMBLE POUR BUREAU PRACTITIONNER 3,6 V

- Ophtalmoscope Standard avec ampoule halogène
- Oscope Standard avec ampoule halogène
- 2x Batterie au lithium
- Chargeur double au lithium et câble d'alimentation
- Kit de fixation murale pour chargeur double
- Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Tube de spécimens jetables
- Extracteur d'ampoules
- Chambre étanche à l'air-ATC Mac
- Mallette double
- Instructions pour l'utilisateur

- Ophtalmoscope Practitioner avec ampoule halogène
- Oscope à fibre optique avec ampoule halogène
- 2x Batterie au lithium
- Chargeur double au lithium et câble d'alimentation
- Kit de fixation murale pour chargeur double
- Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Tube de spécimens jetables
- Extracteur d'ampoules
- Adaptateur pour insufflateur d'otoscope
- Mallette double
- Instructions pour l'utilisateur

1729-P-1030

ENSEMBLE DE BUREAU PRACTITIONNER/FIBRE OPTIQUE 3,6 V

- Ophtalmoscope Standard avec ampoule halogène
- Oscope Standard avec ampoule halogène
- 2x Batterie au lithium
- Chargeur double au lithium et câble d'alimentation
- Kit de fixation murale pour chargeur double
- Ampoule halogène de recharge pour ophtalmoscope
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Tube de spécimens jetables
- Extracteur d'ampoules
- Adaptateur pour insufflateur d'otoscope
- Mallette double
- Instructions pour l'utilisateur

Ensemble de bureau rechargeables

1729-P-1055 ENSEMBLE POUR BUREAU STANDARD LED 3,6 V	• Ophtalmoscope Standard à LED halogène • Oscope Standard avec ampoule halogène • 2x Batterie au lithium • Chargeur double au lithium et câble d'alimentation • Kit de fixation murale pour chargeur double • Ampoule halogène de recharge pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spécimens jetables • Extracteur d'ampoules • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur
	• Ophtalmoscope Practitioner LED • Oscope Practitioner avec ampoule halogène • 2x Batterie au lithium • Chargeur double au lithium et câble d'alimentation • Kit de fixation murale pour chargeur double • Ampoule halogène de recharge pour otoscope • 1x Spéculum 1-5 • Tube de spécimens jetables • Extracteur d'ampoules • Mallette double • Instructions pour l'utilisateur

1729-P-1056

ENSEMBLE POUR BUREAU PRACTITIONNER LED 3,6 V

- Ophtalmoscope Standard à LED halogène
- Oscope Standard avec ampoule halogène
- 2x Batterie au lithium
- Chargeur double au lithium et câble d'alimentation
- Kit de fixation murale pour chargeur double
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Tube de spécimens jetables
- Extracteur d'ampoules
- Chambre étanche à l'air-ATC Mac
- Mallette double
- Instructions pour l'utilisateur

- Ophtalmoscope Practitioner LED
- Oscope à fibre optique avec ampoule halogène
- 2x Batterie au lithium
- Chargeur double au lithium et câble d'alimentation
- Kit de fixation murale pour chargeur double
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Tube de spécimens jetables
- Extracteur d'ampoules
- Adaptateur pour insufflateur d'otoscope
- Mallette double
- Instructions pour l'utilisateur

1729-P-1057

ENSEMBLE POUR BUREAU LED 3,6V PRACTITIONNER /FIBRE OPTIQUE

- Ophtalmoscope Practitioner LED
- Oscope à fibre optique avec ampoule halogène
- 2x Batterie au lithium
- Chargeur double au lithium et câble d'alimentation
- Kit de fixation murale pour chargeur double
- Ampoule halogène de recharge pour otoscope
- 1x Spéculum 1-5
- Tube de spécimens jetables
- Extracteur d'ampoules
- Adaptateur pour insufflateur d'otoscope
- Mallette double
- Instructions pour l'utilisateur

Spécifications

Caractéristiques électriques

L'ophtalmoscope/rétinoscope/otoscope, l'alimentation électrique (EP29-32777) et son unité de charge (1941-P-5289 et 1941-P-5326) constituent ensemble un système électrique médical qui est défini dans EN 60601-1.	
---	--

DONNÉES TENSION ENTRÉE	100-240 V – 50/60 Hz
-------------------------------	----------------------

ALIMENTATION NOMINALE	12V - 2,5 amps
------------------------------	----------------

Fonctionnement

TEMPS DE FONCTIONNEMENT	Branché maximum 15 minutes Débranché minimum 10 minutes
--------------------------------	--

Têtes d'instruments et poignées

TENSION D'ENTRÉE (CC) 3 V 2x piles alcalines AA - BLEUES Batterie rechargeable lithium ion 3,75 V – ROUGE (EP39-18918) Batterie rechargeable NiMH 3,65V - Noir (19194P-7149)	
--	--

Dimensions et poids

OPHTALMOSCOPE JAZZ	178 x 28 x 28 mm (HxLxP) Poids 90 g
---------------------------	--

OTOSCOPE JAZZ	118 x 30 x 52 mm (HxLxP) Poids 90 g
----------------------	--

JAZZ ULTRA OPHTALMOSCOPE	167 x 30 x 28 mm (HxLxP) Poids 63 g
---------------------------------	--

OTOSCOPE JAZZ ULTRA	118 x 30 x 52 mm (HxLxP) Poids 61 g
----------------------------	--

OPHTALMOSCOPE PRACTITIONNER/STANDARD	212 x 43 x 28 mm (HxLxP) Poids 260 g
---	---

OTOSCOPE STANDARD	191 x 30 x 40 mm (HxLxP) Poids 167 g
--------------------------	---

OTOSCOPE PRACTITIONNER	191 x 30 x 50mm (HxLxP) Poids 172 g
-------------------------------	--

OTOSCOPE À FIBRE OPTIQUE	191 x 36 x 60 mm (HxLxP) Poids 174 g
---------------------------------	---

OPHTALMOSCOPE POCKET	191 x 22 x 22 mm (HxLxP) Poids 150 g
-----------------------------	---

OTOSCOPE POCKET	191 x 25 x 40mm (HxLxP) Poids 143 g
------------------------	--

Classification

CLASSIFICATION	Classe II
CLASSIFICATION	Protection de type B contre les chocs

Autres instruments Keeler

Avec plus de 100 ans d'expérience dans le secteur, Keeler est devenu un nom connu des optométristes et des ophtalmologistes du monde entier.

Consultez notre gamme complète sur
www.keeler.co.uk | www.keelerusa.com

Adresse de production



Keeler Ltd. Clewer Hill Road Berkshire SL4 4AA Royaume-Uni

Vous avez une question ? - Appelez-nous

ROYAUME-UNI : +44 (0)1753 857177 Inde : +91 99 3031 1090

USA : +1 610 353 4350

Brésil : +55 11 4302 6053

Chine : +86-18512119109

Keeler
— A world without vision loss —



A **Halma** company

CE 1639